


signia

Styletto X ja Styletto X Charger

Käyttöohje

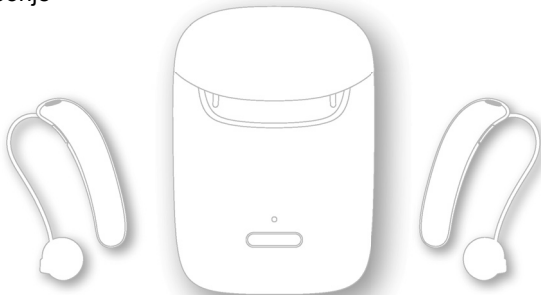

Sisältö

Tervetuloa	6
Käyttötarkoitus	8
Kuulokojeesi	9
Kojeen tyyppi	10
Tutustuminen kuulokojeisiisi	11
Osat ja nimet	12
Kuulo-ohjelmien	15
Ominaisuudet	15
Päivittäinen käyttö	16
Lataaminen	16
Kuulokojeiden kytkentä päälle ja pois	24
Valmiustilaan vaihtaminen	25

Kuulokojeen asettaminen paikoilleen ja poistaminen	26
Kuulo-ohjelmien vaihtaminen	33
Laturin sisäisen akun lataaminen	34
Laturin akun kapasiteetin tarkastus	39
Erityiset kuuntelutilanteet	41
Puhelimessa	41
Kuulokojeiden lentokonetila	43
Usein kysytyt kysymykset	44
Huolto ja hoito	47
Kuulokojeet	47
Korvakappaleet	51
Laturi	56
Ammattilaisen tekemä huolto	57

Kuulokojeiden ja laturin tärkeitä turvallisuustietoja	58
Tietoja ladattavien litiumioniakkujen turvallisuudesta	58
Kuulokojeiden turvallisuustiedot	61
Laturin turvallisuustiedot	61
Lisätietoja	68
Lisävarusteet	68
Kuulokojeiden ja laturin käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet	69
Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä	71
Symbolit	72
Kuulokojeiden vianmääritys	77
Laturin vianmääritys	79
Maakohtaiset tiedot	82

Tärkeitä tietoja	83
Laturin vaatimustenmukaisuustiedot	83
Huolto ja takuu	86

Tervetuloa

Kiitos, että valitsit kuulokojeemme käyttöösi elämäsi joka tilanteessa. Kuten minkä tahansa uuden asian kohdalla, sen käyttöön totuttelu saattaa viedä hetken.

Tämä opas kuulokojeasiantuntijasi tuen lisäksi auttaa sinua ymmärtämään edut ja paremman elämänlaadun, jonka kuulokojeesi voivat sinulle tarjota.

Saat parhaan hyödyn kuulokojeistasi, mikäli käytät niitä joka päivä koko päivän ajan. Tämän avulla niihin on helpompi tottua.



VAARA

On tärkeää lukea tämä käyttöohje ja turvakäyttöohje läpi huolellisesti ja kokonaan. Noudata turvaohjeita vahinkojen ja vammojen välttämiseksi.



Lataa kuulokojeesi täyteen, ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran.

Käyttötarkoitus

Kuulokojeet on tarkoitettu parantamaan sellaisten henkilöiden kuuloa, joilla on heikentynyt kuulo. Kuulokojeen diagnoosi ja määrääminen on suoritettava kuuloterveysspesialistin toimesta, esim. akustikon, audiologin tai korva-, nenä- ja kurkkulääkärin toimesta.

Tämä laite on tarkoitettu tiettyjen sisäänrakennetuilla akuilla (uudelleenladattavilla litiumioniakuilla) varustettujen kuulokojeittemme lataamiseen.

Käytä kuulokojeita ja lisävarusteita ainoastaan asianomaisissa käyttöohjeissa kuvaillulla tavalla.

Kuulokojeesi



Tässä käyttöohjeessa kuvaillaan valinnaisia ominaisuuksia, joita kuulokojeessasi saattaa olla tai ei ehkä ole.

Pyydä kuulokojeasiantuntijaasi ilmoittamaan ominaisuudet, jotka koskevat sinun kuulokojettasi.

Kojeen tyyppi

Kuulokojeesi ovat RIC-mallia (vastaanotin korvakäytävässä). Vastaanotin asetetaan korvakäytävään ja kytketään kojeeseen vastaanotinkaapelilla. Kojeita ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille tai henkilöille, joiden kehitystaso vastaa alle 3-vuotiaan lapsen tasoa.

Kuulokojeessasi on sisäänrakennettu akku (uudelleenladattava litiumioniakku). Tämän mahdollistaa vaivattoman lataamisen laturimme avulla.

Langaton tekniikka mahdollistaa edistyneet äänentoistotoiminnot ja synkronoinnin kuulokojeiden välillä.

Kuulokojeisiin sisältyy Bluetooth® low energy.* teknologia, joka mahdollistaa helpon tiedonsiirron älypuhelimien ja suoratoiston iPhoneen kautta**.

Tutustuminen kuulokojeisiin


Kuulokojeissasi ei ole säätimiä.

Mikäli haluat säätää äänenvoimakkuutta tai vaihtaa kuulo-ohjelmia käsin, voit kysyä kuulokojeasiantuntijaltasi kauko-ohjainvaihtoehdosta.

* Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia, ja tuotteen laillinen valmistaja käyttää tällaisia tavaramerkkejä lisenssin alaisuudessa. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat asianomaisille omistajilleen.

** iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc:n tuotemarkkeja, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Osat ja nimet

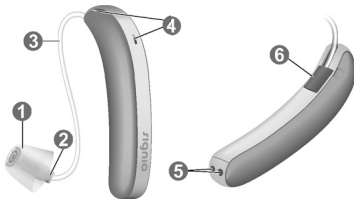

❶ Korvakappale


❷ Vastaanotin

❸ Vastaanotinkaapeli

❹ Mikrofonin aukot

❺ Latausliitännät

❻ Puolen ilmainen
(punainen = oikea korva,
sininen = vasen korva)

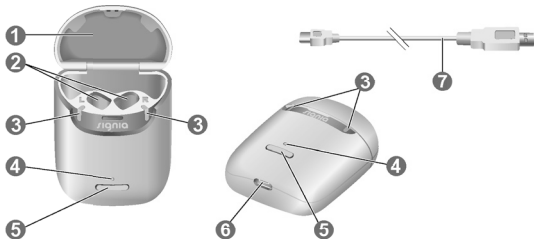

1 Kansi

2 Latausaukot

3 Tilan merkkivalot kuulokojeet

4 Tilan merkkivalot laturi

5 Painike

6 USB-portti virtalähteelle

7 USB-virtakaapeli

Voit käyttää seuraavia vakiokorvakappaleita:

Vakiokorvakappaleet

Koko



Click Sleeve (aukollinen tai suljettu)



Click Dome™ yksittäinen
(avoin tai suljettu)



Click Dome puoliavoin



Click Dome kaksinkertainen

Vakiokorvakappaleet ovat helposti vaihdettavissa. Lue lisää osasta "Huolto ja hoito".

Kuulo-ohjelmien

1

2

3

4

5

6

Lue lisää osasta "Kuulo-ohjelmien vaihtaminen".

Ominaisuudet



Tinnituksen hoitotoiminto pitää ääntä, joka vie huomion tinnituksesta.

Päivittäinen käyttö

Lataaminen


Laturin käyttötavat

Laturia voi käyttää kolmella eri tavalla.

Lataaminen pistorasiasta

Kun laturi on kytketty pistorasiaan tai asetettu langattomalle Qi-latausalustalle, se lataa kuulokojeet (jos ne on asetettu laturiin) ja samanaikaisesti sisäänrakennetun akun.

Niin kauan kuin laturia ladataan ulkoisen virtalähteen kautta, laturin merkkivalo näyttää sisäänrakennetun akun lataustilan ja kuulokojeiden merkkivalot näyttävät kuulokojeiden tilan.

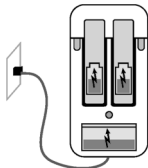


Virransäästämiseksi merkkivalot sammuvat langattoman latauksen jälkeen, kun laturi ja kuulokojeet on ladattu täyteen.

Lataaminen liikkeellä

Jos olet liikkeessä eikä sähköpistorasiaa ole käytettävissä, voit silti ladata kuulokojeesi. Laturin sisäinen akku syöttää virtaa kuulokojeisiin. Laturin on oltava tätä varten päällä.


Laturin ja kuulokojeiden lataustilat saa näkyviin painiketta painamalla tai avaamalla kannen.

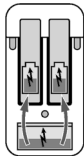

Säilyttäminen

Kun kuulokojeet on ladattu, voit säilyttää kuulokojeesi turvallisesti laturin sisällä kansi suljettuna.

Jos säilytät kuulokojeita pidemmän aikaa, voit sammuttaa laturin. Laturi voidaan kytkeä pois päältä vain, kun sitä ei ole liitetty virtalähteeseen.

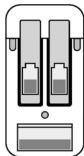

Laturin kytkeminen päälle tai pois päältä


Kun laturi on kytketty sähköpistorasiaan, se kytkeytyy automaattisesti päälle eikä sitä voi kytkeä pois päältä.

Kun laitteet ladataan liikkeessä, laturin voi kytkeä päälle tai pois päältä painamalla painiketta ja pitämällä se alhaalla 5 sekunnin ajan.

- Kun laturi kytkeytyy päälle, kuulokojeiden tila ja laturin sisäisen akun tila näytetään 7 sekunnin ajan.
- Kun laturi sammuu, etummainen merkkivalo syttyy vihreänä ja häviää noin 7 sekunnin kuluessa. Sammutus on suoritettu noin 7 sekunnin kuluttua.

Kuulokojeiden lataaminen

- ▶ Laita oikea kuulokoje kirjaimella "R" merkittyyn laturin kohtaan ja vasen kuulokoje kirjaimella "L" merkittyyn laturin kohtaan.
- ▶ Laita korvakappaleet mukavasti paikoilleen.
- ▶ Sulje laturin kansi akun virran säästösyistä.
- ▶ Kuulokojeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä ja alkavat latautua. Latauksen tila näkyy 7 sekunnin ajan.

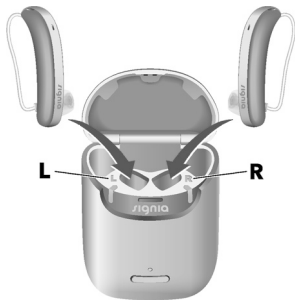

Jos tilan merkkivalot eivät syty, kun asetat kuulokojeet, tarkasta seuraavat:

- Kuulokojeita ei ole asetettu oikein. Työnnä niitä kevyesti sisään niiden latauspaikkoihin tai sulje laturin kansi.
- Laturi on sammutettu. Laita laturi päälle painamalla painiketta ja pitämällä se painettuna 5 sekunnin ajan.
- Laturin sisäinen akku on liian vähissä liikkeessä lataamiseen. Kytke laturi sähköpistorasiaan.




HUOMAA

Jos laitat kuulokojeen laturin väärään kohtaan, vastaanotinkaapeli voi vaurioitua, kun laturin kansi suljetaan.

Kuulokojeiden lataustila

Kuulokojeen viereinen **merkkivalo** ilmaisee kuulokojeen latauksen tilan. Huomaa, että tila näkyy vain, kun kuulokoje on juuri laitettu laturiin, kun painiketta painetaan lyhyesti tai kansi avataan. Kun laturi on pois päältä, mitään tilaa ei näytetä.

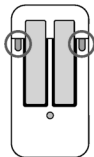

Merkkivalon tilan kuvaus

Sykkivä vihreä

Kuulokojetta ladataan.

Vihreä

Kuulokoje on täysin ladattu.

Merkkivalon tilan kuvaus

Merkkivalo ei pala

Laturissa ei ole kuulokojeita, kuulokoje on asetettu väärin tai laturi on pois päältä.

Sykkivä oranssi

Jäähtymisvaihe. Latausta jatketaan, kun laite on jäähtynyt. Katso osa "Vianmääritys".

Vilkkuva punainen

Kuulokojevirhe. Katso osa "Vianmääritys".

Ilmoitus kuulokojeen vähäisestä varauksesta

Kuulet varoitussignaalin merkinä siitä, että akun varaus on loppumassa. Signaali toistetaan 20 minuutin välein. Sinulla on kuulukojeidesi käyttötavasta riippuen noin 1,5 tuntia aikaa ladata kuulokojeet, ennen kuin ne lakkaavat toimimasta.

Kuulokojeiden kytkentä päälle ja pois

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot kuulokojeittesi kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

- Kytkeminen päälle: Ota kojeet laturista.
Kuulokojeissasi soi käynnistysmelodia. Äänenvoimakkuuden ja kuulo-ohjelman **oletusasetukset** otetaan käyttöön.
- Kytkeminen pois päältä: Laita kuulokojeet laturiin.

Huomaa, että laturin pitää olla päällä.

Valmiustilaan vaihtaminen

Voit siirtää kuulokojeesi valmiustilaan kauko-ohjaimella. Tällöin kuulokoje mykistyy. Kun poistut valmiustilasta, **aiemmin** käytössä ollut äänenvoimakkuus ja kuulo-ohjelma otetaan käyttöön.

Huomio:

- Kuulokojeiden virta **ei** katkea valmiustilassa kokonaan. Ne kuluttavat yhä hieman virtaa.
Tästä syystä suosittelemme käyttämään valmiustilaa vain lyhyitä aikoja.
- Jos haluat poistua valmiustilasta, mutta kauko-ohjain ei ole käsillä: Kytke kuulokojeet pois päältä ja takaisin päälle (laita ne hetkeksi laturiin, kunnes yksi tai useampi merkkivalo syttyy). Odota, että kuulukojeestasi kuuluu käynnistysmelodia. Tämä voi kestää useita sekunteja. Huomaa, että käyttöön otetaan äänenvoimakkuuden ja kuulo-ohjelman **oletusasetukset**.

Kuulokojeen asettaminen paikoilleen ja poistaminen

Kuulokojeesi on tarkasti viimeistelty oikealle ja vasemmalle korvalle erikseen. Värilliset merkit ilmoittavat puolen:


- punainen merkki = oikea korva
- sininen merkki = vasen korva

Kuulokojeen asettaminen paikoilleen:

- Click Sleeves: Varmista, että Click Sleeve -kojeen kaari on kohdistettu vastaanotinkaapelin kaaren kanssa.




Oikein:

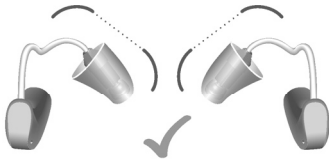

Väärin:



- Pidä vastanotinkaapelista kiinni kaarteesta, joka on lähempänä korvakappaletta.
- Työnnä korvakappale varovasti korvakäytävään **1**.
- Käännä sitä hieman, kunnes se istuu hyvin.
Ava ja sulje suutasi, jotta korvakäytävään ei kerry ilmaa.
- Nosta kuulokojetta ja liu'uta se korvasi yli **2**.

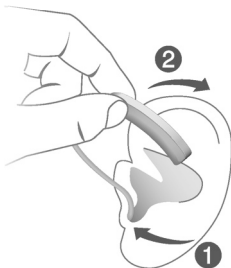



VAARA

Loukkaantumisvaara!

- ▶ Aseta korvakappale huolellisesti korvaan, mutta älä työnnä sitä liian syvälle.



- On ehkä helpointa asettaa **oikea** kuulokoje **oikealla** kädellä ja **vasen** kuulokoje **vasemmalla** kädellä.
- Jos sinulla on vaikeuksia korvakappaleen asettamisessa, vedä toisella kädelläsi kevyesti korvalehdestä alaspäin. Tämä avaa korvakäytävän ja helpottaa korvakappaleen asettamista paikoilleen.


Valinnainen kiinnike auttaa korvakappaleen pysymistä tukevasti korvassasi. Kiinnikkeen asettaminen:

- Taivuta kiinnikettä ja aseta se huolellisesti korvakuoppaan (katso kuvaa).



Kuulokojeen poistaminen:

- ▶ Nosta kuulokojetta ja liu'uta se korvasi yli **1**.
- ▶ Tartu korvakanavassa olevaan vastaanottimeen kahdella sormella ja vedä se varovasti ulos **2**.
Älä vedä vastaanotinkaapelista.

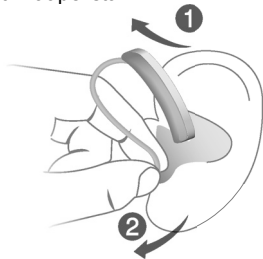



VAARA

Loukkaantumisvaara!

- ▶ Erittäin harvoissa tapauksissa korvakappale saattaa jäädä korvaan kuulokojetta poistettaessa. Mikäli näin tapahtuu, poistata korvakappale terveydehoitoalan ammattilaisella.

Puhdista ja kuivaa kuulokoje käytön jälkeen. Lue lisää osiosta "Huolto ja hoito".

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kuulokojeesi sovittavat äänenvoimakkuuden automaattisesti kuuntelutilanteeseen.

- ▶ Mikäli säädät äänenvoimakkuutta mieluummin käsin, käytä kauko-ohjainvalintaa.

Valinnainen signaali voi ilmoittaa äänenvoimakkuuden muutoksen.

Kuulo-ohjelmien vaihtaminen

Kuuntelutilanteesta riippuen kuulokojeesi säätävät ääntä automaattisesti.

Kuulokojeissasi saattaa olla myös useita erilaisia kuulo-ohjelmia, joissa voit itse muuttaa ääntä tarvittaessa. Valinnainen signaali voi ilmoittaa ohjelman vaihdon.

► Käytä kauko-ohjainta kuulo-ohjelman vaihtamiseksi käsin.

Katso kohdasta "Kuulo-ohjelmat" luettelo kuulo-ohjelmista.

Oletusäänenvoimakkuus otetaan käyttöön.

Laturin sisäisen akun lataaminen



HUOMAA

Yhteensopimattomien osien käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön.

- ▶ Käytä ainoastaan laturin mukana tulevaa virtalähdettä ja maakohtaista sovitinta.
- ▶ Varmista, että sähköpistoke on vaatimustenmukainen. Katso kohta "Sähköpistoketta koskevat vaatimukset".
- ▶ Kytke USB-virtakaapelin USB-C-pää laturin USB-porttiin ❶.
- ▶ Kytke USB-virtakaapelin toinen pää sopivaan sähköpistokkeeseen ❷.



Sisäinen akku alkaa latautua. Kun kuulokojeet on asennettu, myös ne alkavat latautua. Laturin lataustila näkyy jatkuvasti.

Sisäisen akun lataaminen langattomalla Qi-latauksella




- Aseta laturi langattoman Qi-sertifioidun lähetinlevyn päälle. Muutaman sekunnin kuluttua sisäinen akku aloittaa latauksen, joka ilmoitetaan laturissa sykkivällä vihreällä merkkivalolla. Kun kuulokojeet asetetaan paikalleen, ne alkavat latautua, ja se ilmoitetaan niin ikään kuulokojeiden vihreänä sykkivällä merkkivalolla. Jos merkkivalo on pois päältä, kohdista laturi uudelleen Qi-lähetinlevyn keskelle.
- Laturin lataustila näkyy, kunnes se on ladattu täyteen. Sen jälkeen merkkivalot sammutetaan virransäästösyistä.

Laturin lataustila

Etummainen merkkivalo ilmoittaa laturin ja sen sisäisen akun lataustilan.

Kun sisäistä akkua ladataan, latauksen tila ilmoitetaan seuraavasti:

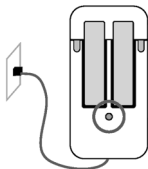

Merkkivalon tilan kuvaus

Sykkivä vihreä

Sisäistä akkua ladataan.

Vihreä

Laturi on ladattu täyteen.

Merkkivalo on sammunut (langaton lataus)

Laturi on ladattu täyteen.

Merkkivalon tilan kuvaus

Sykkivä oranssi

Jäähtymisvaihe. Latausta jatketaan, kun laite on jäähtynyt. Katso osa "Vianmääritys".

Vilkuva punainen

Laturin virhe. Katso osa "Vianmääritys".


Kuulokojeen latauksen tilan yleiskatsaus löytyy kohdasta "Kuulokojeen lataaminen".

Laturin akun kapasiteetin tarkastus

Tarkasta seuraavalla tavalla, riittääkö laturin sisäisen akun kapasiteetti lataamaan kuulokojeet täyteen, kun olet liikkeessä:

- Irrota laturi sähköpistorasiasta.
- Paina painiketta lyhyesti.

Etummainen merkkivalo ilmoittaa laturin sisäisen akun tilan 7 sekunnin ajan.

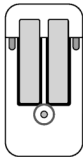

Merkkivalon tilan kuvaus

Vihreä

Sisäisen akun kapasiteetti riittää lataamaan molemmat kuulokojeet täyteen.

Merkkivalon tilan kuvaus

Oranssi

Sisäisen akun kapasiteetti **ei** riitä lataamaan molempia kuulokojeita täyteen.

Vilkkuva oranssi

Laturin sisäinen akku on tyhjä. Kuulokojeiden lataaminen ei ole mahdollista.

Jos tilan merkkivalo ei syty, kun painat painiketta, tarkasta seuraavat:

- Laturi on pois päältä. Laita laturi päälle painamalla painiketta ja pitämällä se painettuna 5 sekunnin ajan.
- Laturin sisäisen akun varaus ei riitä tilan näyttämiseen. Kytke laturi sähköpistorasiaan, odota muutama minuutti ja yritä uudelleen.

Erityiset kuuntelutilanteet

Puhelimessa

Kun olet puhelimessa, pidä puhelimen kuuloketta hieman korvasi yläpuolella. Kuulokojeen ja puhelimen kuulokkeen on oltava kohdistettuina toisiinsa. Käännä kuuloketta hieman siten, että korva ei ole täysin peitossa.



Puhelinohjelma

Saatat haluat käyttää tiettyä äänenvoimakkuutta puhelinta käyttäessäsi. Pyydä kuulokojeasiantuntijaasi määrittämään puhelinohjelmasi asetukset.

- Vaihda puhelinohjelmaan aina puhelimesta ollessasi.
Mikäli puhelinohjelma on määritetty kuulokojeellesi, se näkyy kohdassa "Kuulo-ohjelmien".

Äänen suoratoisto iPhoneella

Kuulokojeesi ovat **Made for iPhone**-tyyppisiä. Toisin sanoen voit vastaanottaa puheluita ja kuunnella musiikkia kuulokojeillasi iPhonesi kautta.

Lisätietoa iOS-yhteensopivista laitteista, yhdistämisestä, suoratoistosta ja muista toiminnoista saat kuulokojeasiantuntijalta.

Kuulokojeiden lentokonetila

Lentotila on käytössä, kun kuulokojeidesi Bluetooth on poistettu käytöstä. Paikoissa, missä Bluetooth-teknologian käyttö ei ole sallittua (esim. joissain lentokoneissa), voit poistaa Bluetooth-tilan käytöstä. Tällä tavoin voit kytkeä kuulokojeen Bluetooth-toiminnon väliaikaisesti pois päältä. Kuulokojeet toimivat ilman Bluetoothia, mutta äänen suoratoisto ja muut toiminnot eivät ole tällöin käytettävissä.

- Voit ottaa Bluetooth-tilan käyttöön / pois käytöstä älypuhelinsovelluksella.

Hälytysääni ilmaisee, milloin Bluetooth -tila on poistettu käytöstä tai aktivoitu.

Usein kysytyt kysymykset

Sinulla on ehkä kysymyksiä liittyen kuulokojeiden lataamiseen. Lue seuraavat kysymykset ja vastaukset. Jos sinulle jää kysymyksiä, kuulokojeasiantuntijasi auttaa sinua.



Miksi kuulokojeeni eivät kytkeydy päälle, kun otan ne pois laturista?

Tarkasta seuraavat:

- Laturi on pois päältä. Laita laturi päälle painamalla painiketta ja pitämällä se painettuna 5 sekunnin ajan. Katso kohta "Laturin kytkeminen päälle tai pois päältä".
- Laturin sisäisen akun varaus on liian vähissä. Kytke laturi sähköpistorasiaan.

Ota nyt kuulokojeet pois laturista.



Kuinka voin laittaa kuulokojeet pois päältä lataamatta niitä?

- ▶ Laita kuulokojeet laturiin. Varmista, että ne on asetettu oikein (tilan merkkivalot syttyvät). Kuulokojeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä ja alkavat latautua.
- ▶ Irrota laturi sähköpistorasiasta.
- ▶ Kytke laturi pois päältä painamalla painiketta ja pitämällä se painettuna 5 sekunnin ajan. Lataaminen loppuu.



Mihin seikkoihin pitää kiinnittää ladattaessa huomiota?

Kuulokojeiden ja laturin pitää olla puhtaita ja kuivia. Ota huomioon kohdassa "Käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet" kuvatut käyttöolosuhteet. Vältä lataamista korkeissa lämpötiloissa, sillä se voi lyhentää akun käyttöikää ja vähentää sen kapasiteettia.

Jos laturia käytetään hyvin lämpimässä ympäristössä, lataaminen pysähtyy kuulokojeiden tai laturin lämpötilan noustessa yli 42 °C:n (107 °F:n). Kuulokojeiden ja/tai laturin merkkivalo sykkii jäähdytysvaiheen aikana oranssina. Latausta jatketaan automaattisesti, kun laite on jäähtynyt. Älä koske kuulokojeisiin ennen kuin etummainen merkkivalo sykkii vihreänä; kuulokojeet voivat olla kuumia.

Huolto ja hoito

Vaurioiden ehkäisemiseksi on tärkeää pitää huolta kuulokojeista ja noudattaa muutamia perussääntöjä, joista muodostuu nopeasti jokapäiväinen tapa.

Kuulokojeet

Puhdistus

Kuulokojeissasi on suojapinnoite. Mikäli kuulokojeita ei kuitenkaan puhdisteta säännöllisesti, saatat vaurioittaa niitä tai aiheuttaa vahinkoa itsellesi.

- Puhdista kuulokojeesi päivittäin pehmeällä, kuivalla nenäliinalla.

- ▶ Älä koskaan käytä juoksevaa vettä tai upota kojeita veteen.
- ▶ Älä koskaan paina voimakkaasti puhdistuksen aikana.
- ▶ Kysy kuulokojeasiantuntijaltasi suositelluista puhdistustuotteista, erityishoitovälineistä ja lisätietoja siitä, kuinka voit pitää kuulokojeesi hyvässä kunnossa.



Kuivaaminen

Kuivaa kuulokojeet tavanomaisilla tuotteilla. Kysy kuulokojeasiantuntijaltasi lisätietoja suositeltavista kuivaustuotteista sekä ohjeita siihen, milloin kuulokoje on syytä kuivata.

Säilytys

- Lyhytaikainen varastointi (enintään joitain päiviä): Sammuta kuulokojeet ja laita ne laturiin.

Laturin pitää olla päällä. Jos laturi ei ole päällä ja laitat kuulokojeet laturiin, kuulokojeiden virta **ei** katkea.

Huomaa, että kun katkaiset virran kuulokojeista kauko-ohjaimella tai älypuhelimien sovelluksella, virta **ei** katkea kuulokojeista kokonaan. Ne jäävät valmiustilaan ja kuluttavat yhä hieman virtaa.

- Pitkäaikainen varastointi (viikkoja, kuukausia...): Lataa ensin kuulokojeesi täyteen. Jätä ne laturiin kannen ollessa suljettuna. Kun kuulokojeet on ladattu täyteen, laturi ja kuulokojeet sammutetaan automaattisesti.

Suosittelimme kuivaustuotteiden käyttämistä kuulokojeita varastoitaessa.

Kuulokoje pitää ladata 6 viikon välein, jotta akun varaus ei pääse syväpurkautumaan, sillä tällöin akkua ei enää voi ladata. Syväpurkautuneita akkuja ei voi enää ladata, vaan ne pitää vaihtaa. Suosittelemme lataamaan akun useammin kuin 6 kuukauden välein.

Ota huomioon kohdassa "Käyttö-, kuljetus- ja säilytysolosuhteet" kuvatut säilytysolosuhteet.

Korvakappaleet


Puhdistus

Korvakappaleisiin saattaa kertyä korvavahaa. Tämä saattaa vaikuttaa äänen laatuun. Puhdista korvakappale päivittäin.

Kaikki muuntyyppiset korvakappaleet:

- Puhdista heti sen poistamisen jälkeen pehmeällä ja kuivalla nenäliinalla.

Tämä estää korvavahan muuttumisen kuivaksi ja kovaksi.

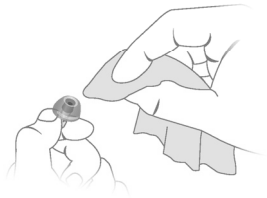

Mallit Click Domes tai Click Sleeves:

► Purista korvakappaleen kärkeä.




Vaihtaminen


Vaihda vakiokorvakappaleet noin kolmen kuukauden välein. Vaihda ne jo aikaisemmin, mikäli huomaat murtumia tai muita muutoksia. Vakiokorvakappaleiden vaihtamistoimenpide riippuu korvakappaleen tyypistä. Katso osasta "Osat ja nimet" korvakappaleesi tyyppi, jonka kuulokojeasiantuntijasi on sinne merkinnyt.

Click Domes vaihto

- Jos haluat poistaa vanhan Click Dome, noudata Click Domespakkauksessa olevia ohjeita. Älä vedä vastaanotinkaapelista.

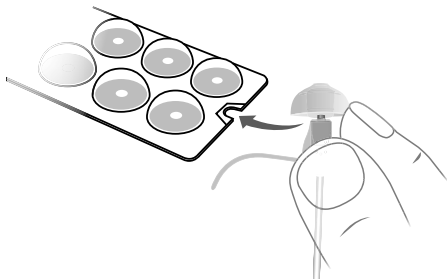


- ▶ Huolehdi erityisesti, että uusi Click Dome napsahtaa selvästi paikoilleen.
- ▶ Tarkista, että uusi Click Dome istuu hyvin.

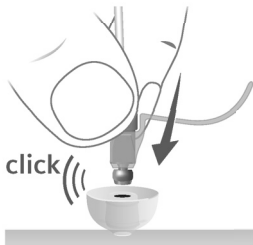

Click Sleeves vaihto

- ▶ Käännä Click Sleeve -suojus nurin.
- ▶ Tartu Click Sleeve -suojukseen ja vastaanottimeen (ei kaapeliin) ja vedä Click Sleeve -suojus ulos.

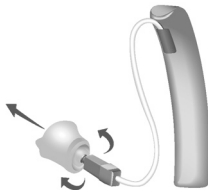

- Huolehdi erityisesti, että uusi Click Sleeve -suojus napsahtaa selvästi paikoilleen.



Laturi

Puhdistus



HUOMAA

Sähköiskun aiheuttamien vammojen riski!

- ▶ Mikäli laturi on puhdistettava, irrota laturi virtalähteestä.
- ▶ Puhdista laturi päivittäin pehmeällä, kuivalla liinalla.
- ▶ Älä koskaan käytä juoksevaa vettä tai upota laturia veteen.
- ▶ Älä steriloï tai desinfioï laturia.

Ammattilaisen tekemä huolto

Kuulokojeasiantuntijasi voi tehdä läpikotaisen, ammattimaisen puhdistuksen ja huollon.

Pyydä kuulokojeasiantuntijaltasi yksilöllistä suositusta huoltoväleistä ja neuvoja.

Kuulokojeiden ja laturin tärkeitä turvallisuustietoja

Tietoja ladattavien litiumioniakkujen turvallisuudesta



VAROITUS

Ladattava litiumioniakku on sisäänrakennettu laitteeseen pysyvästi. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa ladattavan litiumioniakun särkymisen.

Loukkaantumis-, tulipalo- tai räjähdysvaara!

- Noudata tässä kohdassa annettuja ladattavia litiumioniakkuja koskevia turvallisuusohjeita.

- Ota käyttöolosuhteet huomioon. Katso kohta "Käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet".
- Suojaa kuulokojeet kovalta kuumuudelta (esim. tulelta, mikroaaltouunilta, induktiouunilta ja muilta voimakkailta induktiokentiltä) sekä auringonvalolta.
- Lataa kuulokoje vain hyväksytyllä laturilla. Kysy lisätietoja kuulokojeasiantuntijaltasi.
- Älä pura laitetta.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Älä käytä laitteita, jotka ovat vääntyneet tai muutoin selvästi vahingoittuneita.
- Älä käytä laitetta, jos sen suorituskyky latauksen jälkeen heikkenee huomattavasti. Palauta laite kuulokojeasiantuntijallesi.
- Älä hävitä laitetta polttamalla tai veden mukana.

Vaihdon ja korjauksen saa suorittaa vain asiantuntija. Näin ollen:

- Älä korjaa tai vaihda ladattavaa litiumioniakkua itse.
- Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ladattava litiumioniakku rikkoutuu tai räjähtää, pidä se etäällä palavista materiaaleista.

Palauta laitteesi kuulokojeasiantuntijalle kaikissa edellä mainituissa tapauksissa.



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Kytke laturi vain USB-virtalähteeseen, joka on standardin IEC 60950-1 ja/tai IEC 62368-1 mukainen.

Kuulokojeiden turvallisuustiedot

Lisää turvallisuustietoa on kojeen mukana toimitetussa turvallisuusoppaassa.

Laturin turvallisuustiedot

Henkilöturvallisuus



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- ▶ Älä käytä selkeästi vaurioitunutta kojetta, vaan palauta se ostopaikkaan.



VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

- ▶ Älä käytä selkeästi vaurioitunutta kojetta, vaan palauta se ostopaikkaan.



VAROITUS

Huomaa, että tuotteeseen luvatta tehdyt muutokset saattavat vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa vahinkoa.

- ▶ Käytä vain hyväksytyjä osia ja lisävarusteita. Kysy lisätietoja kuulokojeasiantuntijaltasi.



VAROITUS

Räjähdysvaara!

- ▶ Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristöissä (esim. kaivostyöalueilla).



VAROITUS

Palovamman vaara!

- ▶ Älä pane laturiin mitään muuta kuin kuulokojeesi.



VAROITUS

Tukehtumisvaara!

Kojeesi sisältää pieniä osia, jotka on mahdollista niellä.

- ▶ Säilytä kuulokojeet, paristot ja lisävarusteet poissa lasten ja kehitysvammaisten henkilöiden ulottuvilta.
- ▶ Mikäli osat ovat joutuneet niellyiksi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan.



VAROITUS

Latausjärjestelmät saattavat häiritä mittauslaitteita ja sähkölaitteita.

- Sairaaloissa: Laturi on standardien CISPR 35 ja CISPR 32 vaatimusten mukainen. Tämän vuoksi laturin käytön pitäisi olla sairaaloissa sallittua. Laturi voi tästä huolimatta häiritä erittäin herkkiä laitteita. Tällöin on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin (etäisyyttä pitää lisätä herkkiin laitteisiin tai laturi pitää irrottaa virtalähteestä).



VAROITUS

Häiriöt implanttilaitteiden kanssa

- ▶ Laitetta voidaan käyttää kaikkien elektronisten implanttien kanssa, jotka ovat ihmisille asennettavien implanttien sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan standardin ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 mukaisia.
- ▶ Mikäli implanttisi ei ole ANSI/AAMI/ISO 14117:2012-standardin mukainen, keskustele implantoitavan laitteen valmistajan kanssa häiriöriskistä.

Tuoteturvallisuus



HUOMAA

- Suojele kojeita äärimmäiseltä kuumuudelta. Älä jätä kojeita suoraan auringonvaloon.



HUOMAA

- Suojele kojeita korkealta kosteudelta.



HUOMAA

- Älä kuivaa kojeita mikroaaltouunissa.



HUOMAA

- Älä pudota. Sisäiset komponentit voivat vahingoittua.

Sähköpistoketta koskevat vaatimukset

Käytä sähköpistoketta, jonka lähtöjännite on 5 V ja vähimmäislähtövirta 500 mA.



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Kytke laturi vain USB-virtalähteeseen, joka on standardin IEC 60950-1 ja/tai IEC 62368-1 mukainen.

Lisätietoja

Lisävarusteet

Saatavilla olevat lisävarusteet riippuvat kojeen tyypistä. Esimerkkejä tästä ovat: kauko-ohjain, äänen suoratoistolaite tai älypuhelimien sovellus kauko-ohjausta varten.

Kysy lisätietoja kuulokojeasiantuntijaltasi.

Kuulokojeiden ja laturin käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Käyttöolosuhteet	Varauksen purkaminen	Lataaminen
Lämpötila	0–50 °C (32–122 °F)	10–30 °C (50–86 °F)
Suhteellinen kosteus	5–93 %	20–75 %
Ilmanpaine	700–1 060 hPa	700–1 060 hPa

Seuraavien ehtojen on täyttyttävä, jos kuljetus- tai säilytysajat ovat pitkiä:

	Säilytys	Kuljetus
Lämpötila (suositukset)	10–25 °C (50–77 °F)	-20–60 °C (–4–140 °F)
Lämpötila (enimmäisväli)	10–40 °C (50–104 °F)	-20–60 °C (–4–140 °F)
Suhteellinen kosteus (suositukset)	20–80 %	5–90 %
Suhteellinen kosteus (enimmäisväli)	10–80 %	5–90 %
Ilmanpaine	700–1 060 hPa	700–1 060 hPa

Huomaa, että kuulokojeet pitää ladata ainakin 6 kuukauden välein. Yksityiskohtaiset tiedot, katso kohta "Huolto ja hoito".



VAROITUS

Loukkaantumis-, tulipalo- tai räjähdysvaara.

- Kuljeta akut, kuulokojeet ja/tai laturi paikallisten määräysten mukaisesti.

Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä

- Älä heitä akkuja, kuulokojeita tai laturia kotitalousjätteen sekaan ympäristön saastumisen välttämiseksi.
- Kierrätä tai hävitä akut, kuulokojeet tai laturi paikallisten määräysten mukaisesti.

Symbolit

Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit



Ilmoittaa tilanteesta, joka saattaa johtaa vakaviin, keskivaikeisiin tai pieniin vammoihin.



Ilmoittaa mahdollisesta omaisuusvahingosta.



Neuvoja ja vihjeitä kojeen parempaan käsittelyyn.



Usein kysytyt kysymykset.

Laitteessa tai pakkauksessa olevat symbolit



CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, vahvistaa tiettyjen EU-direktiivien noudattamisen, katso kohta "Vaatimustenmukaisuustiedot".



Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja radioliikenteen vaatimustenmukaisuusmerkintä, Australia, katso osa "Vaatimustenmukaisuustiedot".



Ilmoittaa laitteen laillisen valmistajan.



Älä hävitä kojetta tavallisen talousjätteen mukana. Lue lisää kohdasta "Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä".



Laitteessa tai pakkauksessa olevat symbolit



Lue ja noudata käyttöohjeen ohjeita.



Direktiivin IEC 60601-1 mukaan tämän laitteen sovelletut osat luokitellaan tyyppin B osiksi.



Pidä kuivana kuljetuksen aikana.



Lämpötila kuljetuksen aikana. Katso lisätietoja kohdasta Käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet.



Suhteellinen kosteus kuljetuksen aikana. Katso lisätietoja kohdasta Käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet.

Laitteessa tai pakkauksessa olevat symbolit



Ilmanpaine kuljetuksen aikana. Katso lisätietoja kohdasta Käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet.



Lääkinnällinen laite.



Yhteensopiva Qi-sertifioitujen langattomien laitteiden kanssa.



Bluetooth® alhainen energiateknologia.

Made for



iPhone | iPad | iPod

"Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" merkitsevät, että laite on suunniteltu siten, että siinä on liitäntä erityisesti iPodille, iPhoneille tai iPadille, ja että kehittäjä on sertifioinut sen vastaamaan Applen suorituskykystandardeja. Apple ei vastaa tämän kojeen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta turva- ja lakisääteisiä standardien osalta. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö iPhoneen, iPadin tai iPodin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman ominaisuuden suorituskykyyn.

Kuulokojeiden vianmääritys

Ongelma ja mahdolliset ratkaisut

Ääni on heikko.

- Lisää äänenvoimakkuutta.
 - Lataa kuulokoje.
 - Puhdista tai vaihda korvakappale.
-

Kuulokoje päästää viheltävää ääntä.

- Aseta korvakappale uudelleen, kunnes se istuu hyvin.
 - Pienennä äänenvoimakkuutta.
 - Puhdista tai vaihda korvakappale.
-

Ongelma ja mahdolliset ratkaisut

Ääni on vääristynyt.

- Pienennä äänenvoimakkuutta.
 - Lataa kuulokoje.
 - Puhdista tai vaihda korvakappale.
-

Kuulokoje pitää signaaliääniä.

- Lataa kuulokoje.
-

Kuulokoje ei toimi.

- Kytke kuulokoje päälle.
 - Lataa kuulokoje. Seuraa myös laturin tilamerkkivaloja.
-

Ota yhteyttä kuulokojeasiantuntijaasi, jos muita ongelmia ilmenee.

Laturin vianmääritys

Ongelma ja mahdolliset ratkaisut

Mikään merkkivaloista ei pala.

- Tarkista, onko virtalähde kytketty oikein.
-

Merkkivalot sykkivät oranssina.

Laturi on saavuttanut lämpötilarajan ja on nyt jäähtymisvaiheessa. Latausta jatketaan jäähdytyksen jälkeen (noin 15 minuuttia).

- Älä koske kuulokojeisiin merkkivalojen vilkkuessa oranssina. Kuulokojeet voivat olla kuumia.
- Jos laturi siirtyy jäähdytysvaiheeseen useita kertoja latauksen aikana, varmista, että sijoitat laturin ympäristöön, joka on suositeltujen käyttöolosuhteiden mukainen.

Ongelma ja mahdolliset ratkaisut

Laturin merkkivalo vilkkuu punaisena.

Laturissa on tapahtunut virhe.

- Ota kuulokojeet pois laturista ja kytke laturi irti virtalähteestä.
- Kytke laturi takaisin virtalähteeseen ja pane kuulokojeet takaisin latausaukkoihin.

Jos merkkivalot vilkkuvat edelleen punaisina:

- Ota kuulokojeet pois laturista ja kytke laturi irti virtalähteestä.
 - Kysy neuvoa kuulokojeasiantuntijaltasi.
-

Ongelma ja mahdolliset ratkaisut

Kuulokojeen merkkivalo vilkkuu punaisena.

Kuulokojeessa on tapahtunut virhe.

- Ota vastaava kuulokoje pois laturista ja irrota laturi virtalähteestä.
 - Kysy neuvoa kuulokojeasiantuntijaltasi.
-

Ota yhteyttä kuulokojeasiantuntijaasi, jos muita ongelmia ilmenee.

Maakohtaiset tiedot

Yhdysvallat ja Kanada

Sertifiointitiedot kuulokojeille, joissa on langaton toiminto:

Styletto X:

- RF-moduuli 2
- Sisältää FCC-tunnisteen: SGI-RFM002
- Sisältää IC: 267AB-RFM002

Tärkeitä tietoja

Laturin vaatimustenmukaisuustiedot

CE-merkinnällä ilmoitetaan, että tuote on seuraavien EU-direktiivien mukainen:



- 2014/30/EU sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
- 2014/35/EU tietyille jänniterajoille suunnitelluista sähkölaitteista
- 2011/65/EU RoHs, joka koskee vaarallisten aineiden käytön rajoittamista

CE-merkintä ilmaisee, että tuote on tiettyjen EU-direktiivien mukainen. Yhteensopivuusilmoitus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.signia-hearing.com/doc.

Tämä laite täyttää EN 55011:2016/ A1:2017 ryhmän 2 luokan B vaatimukset.

Tämä laite on FCC-määräysten osan 18 ja
CAN RSS-216 / CNR-216 määräysten mukainen.

Käytölle ovat seuraavat ehdot:

- Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä,
- laitteen täytyy vastaanottaa mahdolliset häiriöt mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa, ja
- käyttäjän on säilytettävä minimietäisyys 20 cm (8 tuumaa) latauksen aikana.

Kuulokojeiden vaatimustenmukaisuustiedot ovat kojeen mukana toimitetussa turvallisuusoppaassa.

Huolto ja takuu

Sarjanumerot

Vasen kuulokoje:

Oikea kuulokoje:

Laturi:

Huoltopäivämäärät

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Takuu

Ostopäivämäärä:

Takuuaika kuukausina:

Kuulokojeasiantuntijasi



Laillinen valmistaja

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Saksa

Puh. +49 9131 308 0

Made for

 **iPhone** | **iPad** | **iPod**

Document No. 04109-99T02-7300 FI

Order/Item No. 109 803 17

Master Rev03, 05.2020

© 05.2020, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-styletto.com